



细胞分选/富集试剂盒说明书合集

www.tbdscience.com

天津市灏洋生物制品科技有限责任公司

天津灏洋华科生物科技有限公司

大（小）鼠脾脏中性粒细胞分离液 KIT 说明书

实验小鼠品系选择：

部分C57小鼠不适用于本试剂盒。

（注：C57 小鼠易出现红细胞沉降不完全，甚至完全不沉降的现象，请慎重选择。）

【包装规格】

200ml/Kit

【产品组成】

为方便广大用户使用，试剂内容如下：

	名称	产品编号	规格
A	分离液 1（大/小鼠脾脏中性粒分离液）		200ml
B	组织样本稀释液（赠品）	2010C1119	200ml
C	清洗液（赠品）	2010X1118	200ml
D	红细胞裂解液（赠品）	NH4CL2009	100ml
E	红细胞沉降液（6%羟乙基淀粉）（赠品）	HES-TBD550-80	80ml
F	匀浆冲洗液（赠品）	F2013TBD	200ml
G	说明书		1 份

【实验前准备】

1. 适用仪器

最大离心力可达 1200g 的水平转子离心机。

（离心机使用时调整为慢升慢降（具体参数请咨询离心机厂家）建议升速（指开始启动→达到设定离心力）的时间、降速（指设定离心时间完成→机器完全停止）时间均控制在 3 分钟左右。）

2. 实验最佳分离时间

为获得最佳的实验结果，最好在取样 2h 内进行实验，样品存放时间越长，细胞分离效果越差。样品放置超过 6h 后分离效果更差甚至不能达到分离目的。

天津市灏洋生物制品科技有限责任公司 天津灏洋华科生物科技有限公司 - 1 -

天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路 15 号润丰科技 3 幢 5 层

技术服务 Tel: 15822121119 15822691119 13920701119 ◆ Fax: 022-58921250 ◆ QQ: 2768676807

www.tbdscience.com ◆ E-mail: gx15822121119@163.com

灏洋生物 TBDsciences



3. 分离液的使用环境

- 分离液需常温（15℃-25℃）避光保存，严禁冷藏冷冻保存；
- 使用时严格遵守无菌操作规范（超净工作台或生物安全柜内），并在 20℃-25℃ 环境温度下进行操作，20℃ 条件下分离效果最佳。超出此温度范围，有可能使分离液密度发生改变，造成分离效果不佳。

4. 无菌离心管

序号	产品名称	产品货号	规格
1	无菌玻璃离心管/5mL(随试剂盒附赠 5 支)	TUB2016	100 支/包
2	无菌硅化离心管/10mL(随试剂盒附赠 5 支)	TUB2015	100 支/包
3	PBMC 高效离心管/50ml	601001	20 支/盒
4	PBMC 高效离心管/15ml	601002	5 支/包

5. 参考值（目的细胞参考范围）

本试剂盒可保证目的细胞的提取率大于 80%，不是纯度。如需获得高纯度目的细胞，请配合免疫磁珠分选。本试剂盒可减少磁珠的使用量，减少成本。

【检验方法】

全过程样本、试剂及实验环境均需在 20±2℃（试剂需要复温。夏季 20℃，冬季 25℃。）的条件下进行。

【脾脏组织样本细胞悬液的制备】

- 取脾脏组织块称重后，用眼科剪刀无菌操作，将脾脏组织剪成小块。
- 将组织块放在 70μm 细胞筛网(产品编号：TBDTM-SC，需要另购)上，用研磨器反复揉搓，边揉搓边加入匀浆冲洗液（以 0.1g 组织为例，约加 5-8ml），使细胞全部通过筛网冲到离心管中。

注：需要让细胞形成单个的细胞悬液冲到离心管中，而不是被研磨挤压到离心管中。

目的：使脾脏组织形成单个的细胞，而不是成团或碎片组织。单个的细胞更易分离。

- 弃去筛网，脾脏组织研磨液经 300-400g，离心 10min，弃去上清。
- 用红细胞沉降液重悬组织细胞，将细胞悬液细胞浓度调整为 2×10^8 - 1×10^9 /ml（以 0.1g 脾脏组织为例，约使用 0.5-1ml 红细胞沉降液重悬细胞），备用。

注：A. 多个动物脾脏组织需要分离时，应逐个单独进行，不可同时混合进行研磨。

B. 用红细胞沉降液重悬脾脏组织细胞时，以小鼠或大鼠为例，约使用 0.5ml 或 1.0ml 红细胞沉降液重悬细胞。细胞悬液的细胞浓度约为 2×10^8 - 1×10^9 /ml。

C. 若发现匀浆冲洗液冲洗的细胞粘度较大，可进行以下处理：



细胞分选/富集试剂盒说明书合集

www.tbdscience.com

天津市灏洋生物制品科技有限责任公司

天津灏洋华科生物科技有限公司

- ①配置新冲洗液：4 份的匀浆冲洗液加 1 份的胰蛋白酶/EDTA 消化液（产品编号：TE2004Y 需另购）进行稀释，配置为新冲洗液。
- ②离心管预处理：再研磨开始之前，在离心管中加入 0.5-1ml 胎牛血清，进行保护和终止胰蛋白酶/EDTA 消化液。
- ③再进行 2,3,4 实验步骤即可。

根据脾脏组织样本单细胞悬液的量，分以下两种情况：

情况 A：样本细胞悬液量 0.5-1.5ml 时，实验方法如下：

1. 取一支 5ml 无菌玻璃离心管（货号：TUB2016），先加入 2ml 分离液 1，后缓慢加入 1ml 的 80%浓度的分离液溶液(分离液 1：组织样本稀释液=4：1 的混合液)，形成梯度界面。再缓慢加入 0.5-1.0ml 样本细胞悬液。样本细胞悬液小心加于分离液液界面之上。各液面分层一定要清晰。（分离液总量不得少于 2ml，样本细胞悬液不得少于 0.5ml）或（取一支 10ml 无菌硅化离心管（货号：TUB2015），先加入 3ml 分离液 1，后缓慢加入 1.5ml 的 80%浓度的分离液溶液(分离液 1：组织样本稀释液=4：1 的混合液)，形成梯度界面，再缓慢吸取 0.5-1.5ml 样本细胞悬液加于分离液液面之上。（分离液试剂总量不得少于 4ml，样本细胞悬液不得多于 1.5ml。总液体量不得超过 2/3））

注：两层分离液添加完成后，需要在 1min 内添加样本细胞悬液。

2. 以 450g，离心 30min（如使用 5ml 无菌玻璃离心管，可能需要使用 50ml 的 PBMC 高效离心管）。
3. 离心后，此时离心管中由上至下分为五层。第一层为组织稀释液层。第二层为环状乳白色单个核细胞层。第三层为环状乳白色中性粒细胞层（可能会有少量红细胞混杂）。第四层为透明分离液液层。第五层为红细胞和组织细胞碎片层。
4. ①小心吸取组织稀释液层转移到新离心管 A 中。
②小心吸取离心管中的环状乳白色单个核细胞层转移到新离心管 B 中。
③小心吸取离心管中的环状乳白色中性粒细胞层转移到新离心管 C 中。
5. 向含有中性粒细胞的离心管 C 中，加入 5-10ml 清洗液（产品编号：2010X1118），混匀细胞。
6. 400g，离心 10min。弃去上清。
7. 用吸管吸取 5ml 清洗液（产品编号：2010X1118）重悬所得细胞。
8. 250g，离心 10min，弃去上清。
9. 重复清洗两次，弃去上清，用 0.5ml 清洗液（产品编号：2010X1118）或根据下一步实验要求加入相对应液体，重悬所得细胞。

分离图例



天津市灏洋生物制品科技有限责任公司 天津灏洋华科生物科技有限公司 - 3 -

天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路 15 号润丰科技 3 幢 5 层

技术服务 Tel: 15822121119 15822691119 13920701119 ◆ Fax:022-58921250 ◆ QQ:2768676807

www.tbdscience.com ◆ E-mail:gx15822121119@163.com

灏洋生物 TBDsciences

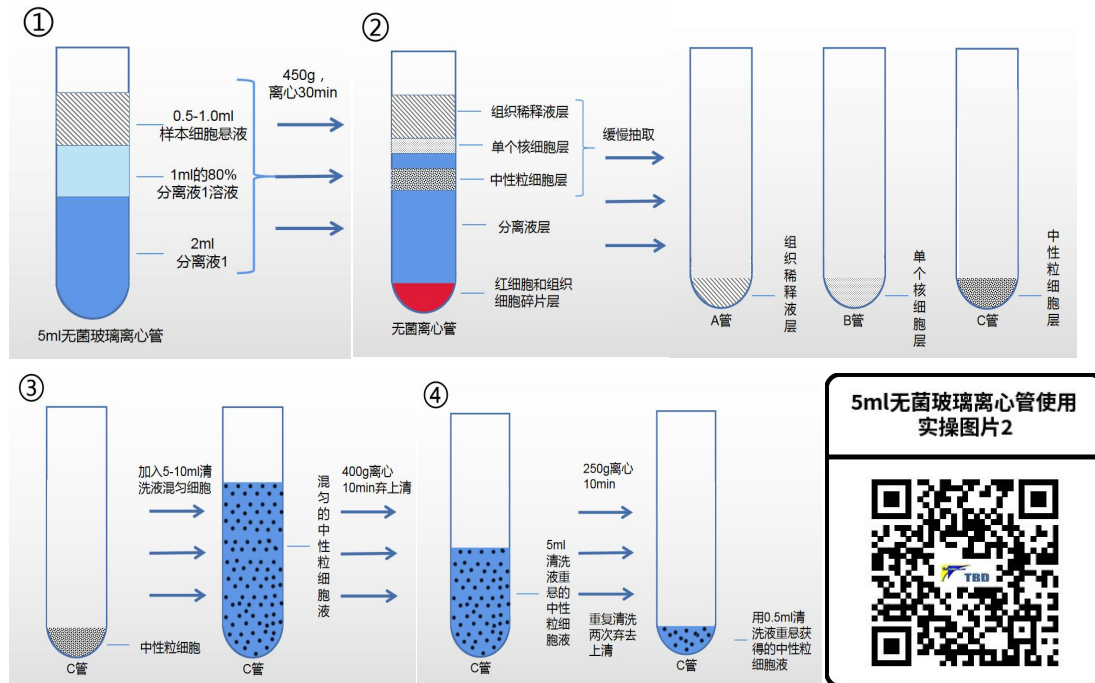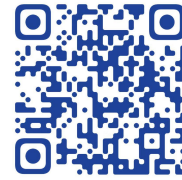


情况 B: 样本细胞悬液量 2.0-3.0ml 时, 实验方法如下:

1. 取一支 15ml 无菌离心管, 先加入 5ml 分离液 1, 后缓慢加入 2ml 的 80%浓度的分离液溶液(分离液 1: 组织样本稀释液=4: 1 的混合液), 形成梯度界面。
2. 再缓慢吸取 2-3ml 样本细胞悬液加于分离液液面之上。各液面分层一定要清晰。(总液体量不得超过 2/3)。


注: 两层分离液添加完成后, 需要在 1min 内添加样本细胞悬液。

3. 以 600g , 离心 30min。
4. 离心后, 此时离心管中由上至下分为五层。第一层为组织稀释液层。第二层为环状乳白色单个核细胞层。第三层为环状乳白色中性粒细胞层(可能会有少量红细胞混杂)。第四层为透明分离液液层。第五层为红细胞和组织细胞碎片层。
5. ①小心吸取组织稀释液层转移到新离心管 A 中。
②小心吸取离心管中的环状乳白色单个核细胞层转移到新离心管 B 中。
③小心吸取离心管中的环状乳白色中性粒细胞层转移到新离心管 C 中。
6. 向含有中性粒细胞的离心管 C 中, 加入 5-10ml 清洗液(产品编号: 2010X1118), 混匀细胞。
7. 400g, 离心 10min。弃去上清。

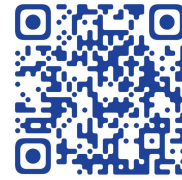

8. 用吸管吸取 5ml 清洗液（产品编号：2010X1118）重悬所得细胞。
9. 250g，离心 10min，弃去上清。
10. 重复清洗两次，弃去上清，用 0.5ml 清洗液（产品编号：2010X1118）或根据下一步实验要求加入相对应液体，重悬所得细胞。



分离图例

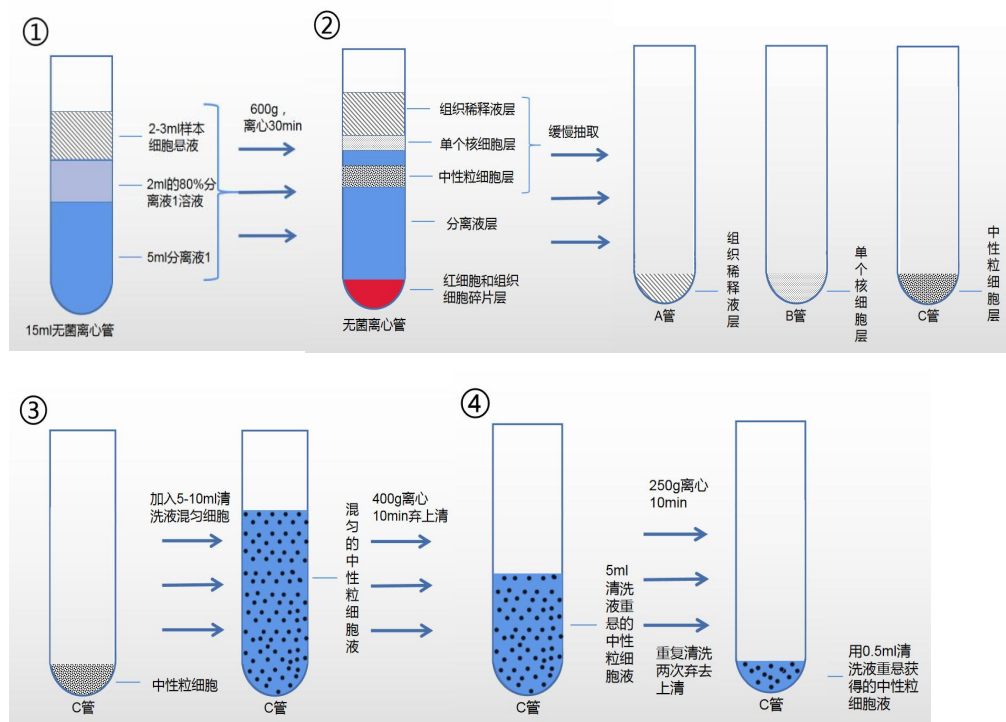

【分离过程中可能出现的情况及处理方案】


情况一：中性粒细胞层混杂红细胞（方法一）

1. 吸取有红细胞混杂的中性粒细胞层。
2. 取 15 毫升离心管加入红细胞混杂的中性粒细胞层，根据红细胞残余数量酌情加入 5-8 倍红细胞裂解液。
- a. 如有红细胞混杂则加入适量红细胞裂解液（产品编号：NH4CL2009）将红细胞裂解（具体方法见“红细胞裂解液使用说明”）即得目的细胞。
- b. 参考红细胞裂解液说明书操作。少时多次裂解后获得中性粒细胞。

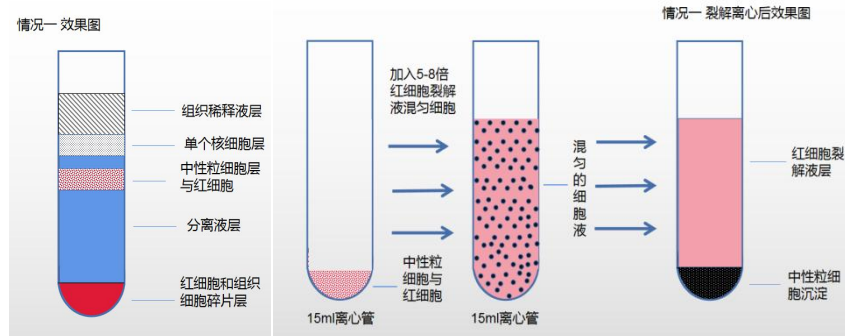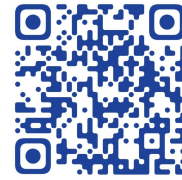


情况一：中性粒细胞层混杂红细胞（方法二）

1. 吸取红细胞混杂的中性粒细胞层，清洗后用红细胞沉降液 1-2ml 重悬细胞。
2. 取 15ml 无菌离心管，加入 5ml 分离液 1，将用红细胞沉降液重悬的 1-2ml 细胞缓慢加于分离液之液面上，400g，离心 20min。
3. 离心后，离心管可分为四层。第一层为稀释液层。第二层为环状乳白色中性粒细胞层。第三层为透明分离液液层。第四层为红细胞层。
4. 可重复检验方法中的目的细胞洗涤方法，获得中性粒细胞。

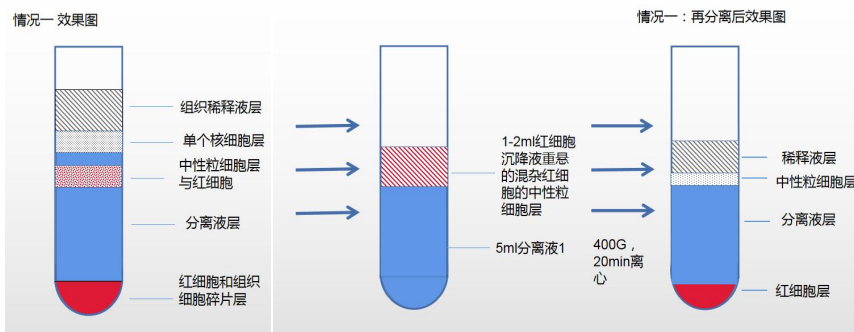

情况二：单个核细胞层和中性粒细胞层混在一起不能分开

1. 吸取全部白色环状细胞层，清洗后用组织样本稀释液 1-2ml 重悬细胞。
2. 使用分离液 1 提纯。
3. 取 15ml 离心管，加入 5ml 的 80%浓度的分离液溶液(分离液 1：组织样本稀释液=4：1 的混合液)，将用组织样本稀释液重悬的 1-2ml 细胞缓慢加于分离液之液面上，400g，离心 20min。
4. 离心后，离心管可分为四层，第一层组织稀释液层，第二层单个核细胞层，第三层分离液层，第四层中性粒细胞层。
5. 可重复检验方法中的目的细胞洗涤方法，获得中性粒细胞。

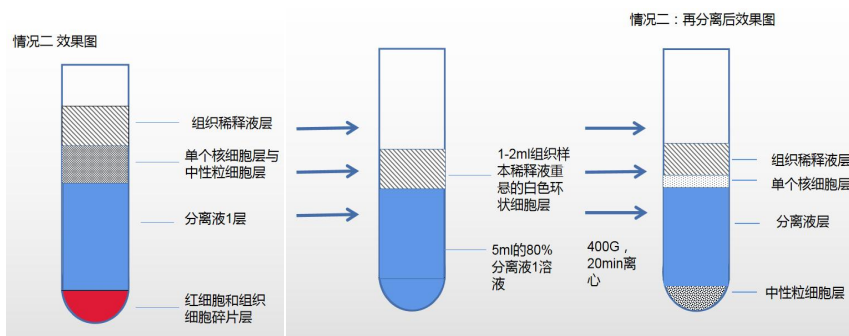

【注意事项】

1. 本实验最好不使用高聚合材质（如聚苯乙烯）的塑料制品，应使用无静电、低静电离心管及未经碱处理过的玻璃制品，因为静电作用将导致细胞贴壁、碱处理的玻璃表面会变成毛面，影响细胞分离效果。
2. 分离液用量大于脾脏组织单细胞悬液样本量时，分离效果更佳。
3. 如实验后细胞得率或活性过低，请联系天津灏洋技术支持以寻求帮助，具体联系方式详见下方生产企业信息。

【储存条件及有效期】

常温保存，有效期2年。本品易感染细菌，需无菌条件操作。无菌条件下操作，启封后置常温保存。如4℃保存，本分离液易出现白色结晶，影响分离效果。

【参考值（参考范围）】

本实验中性粒细胞提取率大于80%。

【可能存在的问题及解决方法】


1. 由于血液粘度、细胞密度等差异可能造成的问题及解决方案如下表所示：

出现情况	出现原因	建议解决方案
离心后目的细胞存在于血浆层或稀释液层	转速过小或离心时间过短	适当增减转速
离心后目的细胞存在于分离液中	转速过大或离心时间过长	
离心后白环层弥散	细胞密度过大	调整细胞密度
离心后白环层太浅或看不见	细胞密度过小	


2. 离心力公式



单位 rpm 与 g 的换算:

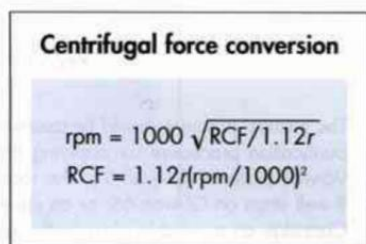

rpm = revolutions per minute
RCF = relative centrifugal force (x g)
r = radius of rotor in mm

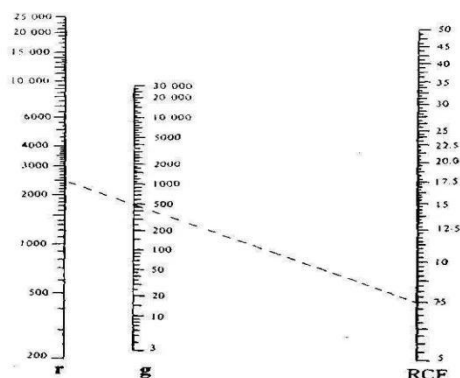

离心速度和离心力的换算

换算法: 在 r 标尺(单位 cm)上取已知转速, 在 RCF 标尺上取已知的离心半径(单位 cm), 将这两点作一直线相连, 直线所通过的 g 标尺上的交叉点即为相应的离心力。

3. 本分离液分离细胞的原理为密度梯度离心, 其密度与温度、大气压等密切相关。不同地区客户可根据当地情况对离心条件进行适当调整。建议对离心条件进行调整时, 恒定离心时间, 对离心转速进行调整。
4. 本分离液依照国际标准, 全部使用药用级原料, 性能指标与国产同类产品略有不同, 可能出现红细胞沉降不完全的情况, 可以适当加大离心转速。

注: 在对离心条件进行调整时, 离心转速的加减以 50-100g 为基数, 直至达到最佳分离效果, 离心力最小不得小于 400g, 最大不得大于 1200g。离心时间以 20-30min 为准。